


Snelgids

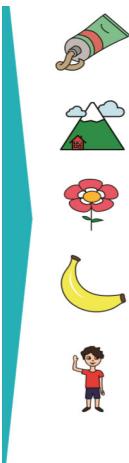

© Sig vzw
versie september 2022

Sig vzw
Pachthofstraat 1, 9308 Gijzegem
info@sig-net.be

Test
SKO module Inconsistentie
Auteur van de test: Werkgroep SKO
Sig vzw

Handleiding en snelgids SKO
Auteurs: Joris Vanopstal en
Jean-Pierre Martens (Red.)
Eindredactie: Geert Andries

Deze snelgids en de SKO-handleiding zijn
downloadbaar op www.SKOTest.be
Vragen? info@SKOTest.be



1. Neem de module Inconsistentie af: stap 1: registreer het kind



patients

add new patient

2. Neem de module Inconsistentie af: stap 2: maak een sessie aan



patient sessions

define/check sessions

Neem de module Inconsistentie af: VOORAF

Laat het kind oefenen



experiments

try exercise

3. Neem de module Inconsistentie af: stap 3: neem de test af



experiments

record patient session

4. Neem de module Inconsistentie af: stap 4: beoordeel de opnames



experiments

make perceptual ratings

5. Neem de module Inconsistentie af: stap 5: haal de resultaten op



experiments

show ratings per exercise

1. Neem de module Inconsistentie af: stap 1= registreer een nieuw kind (indien nog niet gebeurd)

patients

What you can do 

- add new patient**
- your active patients
- your archived patients
- your patient groups
- mail to patient
- customize emoticons

patient sessions

experiments

main page

add new patient

You can add a new patient by entering a minimum number of details (only those marked by a star are obligatory) and by clicking on 'ADD'. If you need more details go to 'your active patients' to get a more elaborate form.

Patient profile

last name (*):

first name (*):

date of birth:

year = month = day =

1

Patient "Peeters Jan" is successfully added.

2



SKO - © Sig vzw - www.SKOTest.be

2. Neem de module Inconsistentie af: stap 2= maak een sessie aan

patient sessions

select/change patient

define/check sessions

1

define/check sessions

You can perform actions on the sessions of this patient (see menu on the left) or select another patient.

Select session to start from:

Select session prototype to start from:

PATIENT SESSION FORM

name of session (yyyy-mm-dd):

description (max. 32 characters):

selected patient:

exercise sequence:

add an exercise:

number of times to do (default 1):

2

3

Session "2022-07-21" was successfully added.



SKO - © Sig vzw - www.SKOTest.be

2

Neem de module Inconsistentie af: VOORAF Laat het kind oefenen

experiments **try exercise**

Exercise to select:

1

2

KLIK HIER VOOR EXTRAHULP

Dit is een oefening met twee oefenitems waarmee u het herhalen van een woord na een eerste benoeming kunt uitproberen.

Voor het eerste oefenitem:
Laat het getoonde begrip spontaan benoemen. Lukt dat niet, laat het dan benoemen in antwoord op de aanvulzin.

Voor het tweede oefenitem:
Laat het getoonde begrip nazeggen (na beluistering van de voorzegzin).

Voor beide oefenitems (indien gelukt):
Vraag om het woord vijfmaal te herhalen van zodra de opnameknop links onder rood kleurt.

SKO - © Sig vzw - www.SKOTest.be

3. Neem de module Inconsistentie af: stap 3= neem de test af

experiments **record patient session**

select patient session
record patient session
listen to responses

Select patient with sessions:
Select a session of that patient:
Peeters.Jan
2022-07-21 (inconsistentietest)

You can perform actions on the selected session (see menu on the left) or select another session.

1

2

Laat het begrip spontaan benoemen. Lukt dat niet, klik dan op het luidsprekertje om het te laten benoemen in antwoord op de aanvulzin. Lukt ook dat niet, probeer dan zelf een benoeming te ontlokken (zonder echter het woord voor te zeggen).


Indien goed benoemd, vraag aan de proefpersoon om het woord vijf maal te herhalen van zodra de opnameknop links onder rood kleurt.

Begeleid de proefpersoon bij het herhalen zodat het woord exact vijf maal herhaald wordt.

SKO - © Sig vzw - www.SKOTest.be

3. Neem de module Inconsistentie af: stap 3= neem de test af

SKO - © Sig vzw - www.SKOTest.be

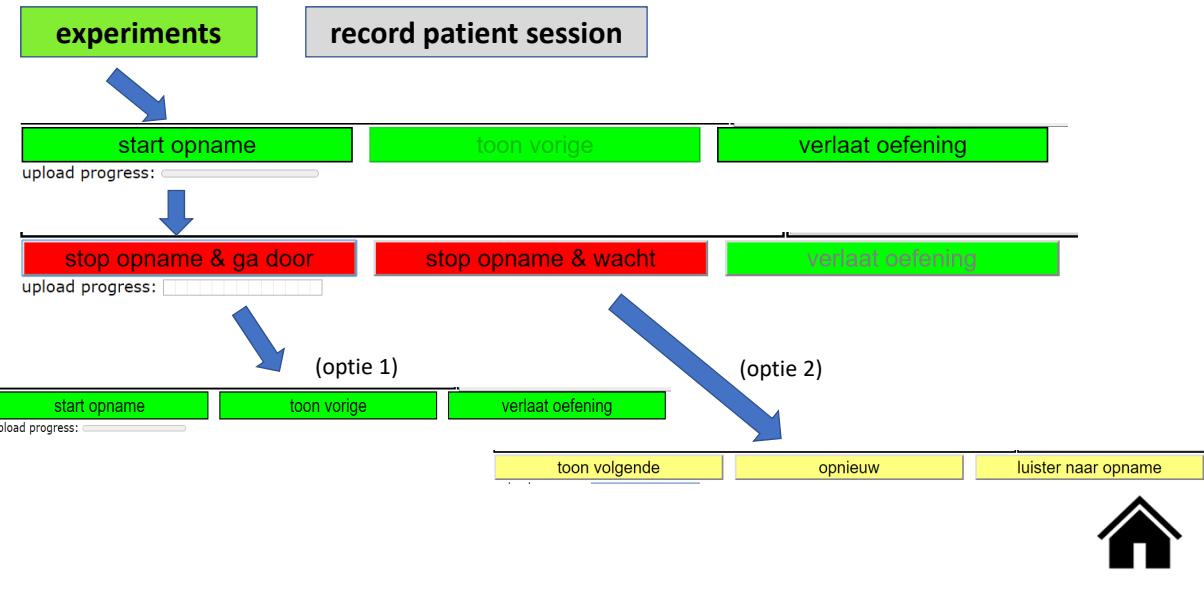

3. Neem de module Inconsistentie af: stap 3= neem de test af

SKO - © Sig vzw - www.SKOTest.be

experiments

record patient session



Je hebt de oefening met succes voltooid. Je kan nu doorgaan naar de volgende oefening door op 'record patient session' te klikken.

1



Je hebt de oefening met succes voltooid.
Je hebt tevens een oefeningensessie volledig doorlopen.

2



4. Neem de module Inconsistentie af: stap 4= beoordeel de opnames

experiments

make perceptual ratings

EXERCISE UNDER EVALUATION: SKO.inco.benoem

SELECT THE SPEECH TASK RECORDING YOU WANT TO LISTEN TO

01 02 03 04 05

1

SELECT THE TRANSCRIPT OF THE SELECTED SPEECH TASK RECORDING

get explanation

1 2 3 4 5

noscore

1

forward exercise

stop rating

next exercise

Vergeet niet af te sluiten



5. Neem de module Inconsistentie af: stap 5= bekijk resultaten, download verslag en pas aan

experiments

show results by automatic

select patient session

record patient session

listen to responses

make perceptual ratings

select human rater

check perceptual ratings

show ratings per exercise

show results by automatic

test microphone

try exercise

patient sessions

main page

Caro Lientje (session: 2022-07-07 inconsistentietest)

Automatic analysis results for this session

cycle	analysis method	emoji	analysis result
1	SKO.inco (spraakinconsistentie)	🟡	Percent variabiliteit (9 scores) = 13.9 Percent voor benoemtaak = 15.0 Percent voor nazegtaak (4 scores) = 12.5

